

検体検査：検体採取の手引き


■ 注意事項

- 検体採取前に食事をした場合、必ず歯磨きをお願いします。
- **歯磨き後から検体採取までは30分以上（可能であれば1時間）空けてください。**
- 検体採取までの30分間に、飲食（水含む）、うがい、歯磨き、ガムを噛むことはお控えください。**うがい薬も絶対使用しないでください。**
- 十分な唾液を出すため、検査を受ける際はリラックスして、口を軽く開き、酸っぱいものをイメージしてください。
（少なくとも1～2分）



唾液採取方法

- ① 管理シールに受検者の氏名と管理IDを記入し、検体採取キットに貼付してください。

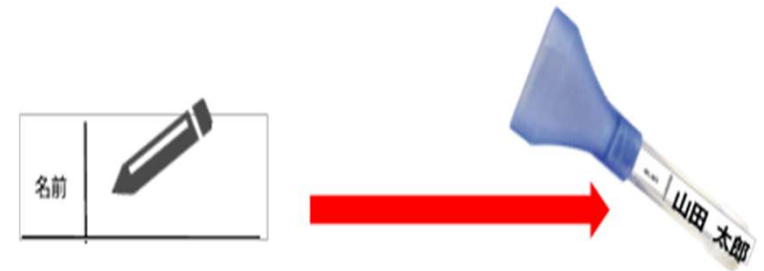

- ② 机の上にラックを置きます

□ 検体採取後、ラックに検査キットを入れます。

- ③ 唾液採取前に、手指消毒します。



唾液採取方法



大きく深呼吸をして 口の中に唾液をよく溜め、漏斗内のメモリ(1mL)の 半分まで 唾液(0.5mL)を流し込む。




唾液が入った容器に不活化輸送液を入れる。



漏斗を外し、赤いキャップで、しっかりと締める。
※漏斗は**破棄容器袋**へ入れる
※注意：しっかり閉めないと、検体が漏れてしまう可能性があります




キャップと容器の底を持ち、よく混ぜる。

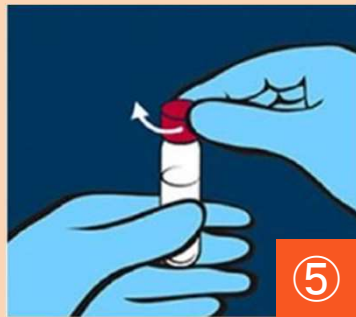

唾液採取容器のフタが確実に閉まってるか確認してください。

※フタがしっかり閉まっていない場合、検体が漏れ、検査できない可能性があります。

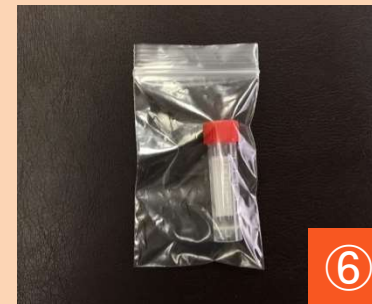

ジップバッグに入れ、封を確実にしてください。

これで採取終了です！